

EXCLUSIVE 65SB




DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE
EXCLUSIVE 65SD

Versione senza sollevamento
motorizzato della tavola.

AVAILABLE ALSO
VERSION
EXCLUSIVE 65SD

Solution without
motorized table elevation.

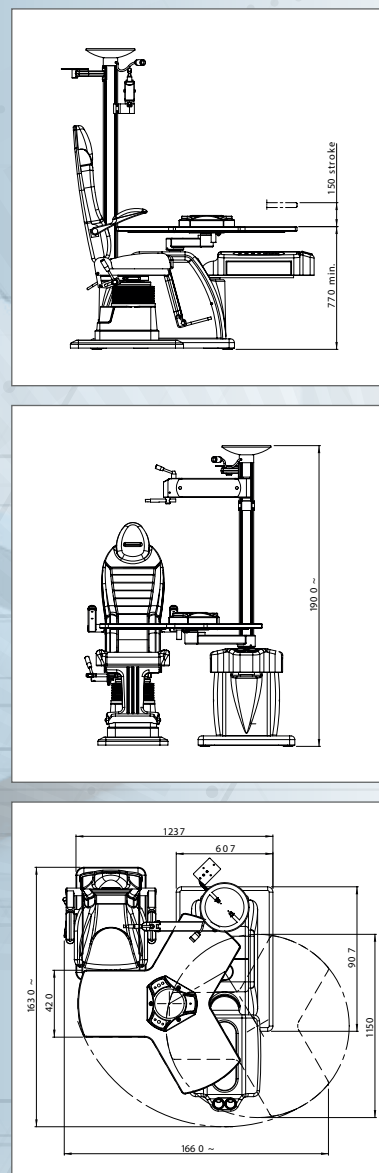

Le dimensioni sono indicative.
The dimensions are indicative.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

RIUNITO EXCLUSIVE 65SB / EXCLUSIVE 65SB UNIT

Tensione alimentazione / Input tension	220V 50-60 Hz. - 110V 50/60 Hz.
Potenza / Power	1060 VA
Potenza lampada / Lamp power	150 W
Altezza tavola / Table height	770-920 mm
Peso / Weight	220 kg
Larghezza / Width	1660 mm
Profondità / Depth	1630 mm
Altezza massima / Maximum height	1900 mm

EXCLUSIVE 65SB



Il riunito Exclusive 65SB è dotato di una tavola a posizionamento manuale per tre strumenti. I piani strumenti sono regolabili in altezza per 15 cm di corsa e vengono portati dall'operatore nella posizione desiderata. Il movimento è bloccato tramite un magnete e sbloccato tramite un comando a pedale. Sulla colonna è possibile applicare oltre al proiettore il braccio autobilanciato orizzontale.

The unit Exclusive 65SB is equipped with an instrument table with manual positioning. The adjustment of the instruments table is 15 cm and it is positioned by the operator in the wished position. The movement is locked through a magnet and released through a foot switch. Besides the projector it is possible applying on the column the horizontal counterbalanced arm.



SOLUZIONI E CARATTERISTICHE /

SOLUTIONS AND FEATURES



Soluzione destra e sinistra
Right and left solution



Con sollevamento elettrico della tavola strumenti
With motorized elevation instruments table



Poltrone disponibili:
Available chairs: tutti i modelli di poltrona
all models of chairs



Opzionali disponibili:
Available optional: Braccio orizzontale art. 63AB o 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Horizontal arm art. 63AB or 63CD
Rechargeable wells art. 65PCR

1. Alloggiamento oftalmoscopio e skiascopio
Ophthalmoscope and skiascope housing
2. Cassetto lenti di prova
Trial lenses drawer



Official Distributor

optohellas®
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ